

检漏仪

服务产品目录

2017年10月



Agilent Technologies

目录

检漏仪服务产品

检漏仪服务系列产品	3
安捷伦全套检漏仪服务系列产品概述。包括 VS、手持式 PHD-4 以及旧款检漏仪的服务范围。	
安捷伦全球技术支持网络	4
全球大多数国家/地区的服务范围。	

合同范围

金牌服务合同	6
一流服务计划，以最快响应速度为关键应用提供支持。	
银牌服务合同	7
超值服务计划，为您的安捷伦检漏仪提供支持服务。	
铜牌服务合同	8
等同保修期计划，帮助您控制成本。	

单次服务

单次服务 — 按需服务选项	9
了解安捷伦各种灵活的按需服务选项，帮助您延长检漏仪的使用寿命并使其随时保持最佳工作状态。	

服务概述	14
全套检漏仪服务系列产品概述。	

安捷伦全球架构

北美服务范围	15
安捷伦在北美的检漏仪服务架构。	
欧洲和印度服务范围	16
安捷伦在欧洲和印度的检漏仪服务架构。	
亚洲服务范围	17
安捷伦在中国大陆、中国台湾和东南亚的检漏仪服务架构。	

订购信息	18
------------	----



安捷伦优势服务计划

安捷伦提供满足您具体需求和预算的全面解决方案。我们以协助您最大限度提高工作效率和延长仪器正常运行时间为己任。

检漏仪系列产品

在售的设备

VS 系列

- 采用简单的双按钮操作，提供完全自动化的启动和校准功能
- 高灵敏度型号
- 油式和干式两种型号
- 通过彩色触摸屏可直观地控制设备
- 多种语言和单位可供选择
- 支持无线远程操作



VS C15

- 市面上最紧凑、最易于集成的组件系统，体积比竞争厂商的系统小 50% 以上
- 接口简单，只需两根电缆：一根电源线和一根通信电缆
- 全面的接口选择 — 串口、模拟、I/O 接口 和 Profinet
- 可选择的灵敏度水平和逆流检漏技术，支持快速、准确测量，在工业应用中最大限度防止污染



PHD-4

- 高灵敏度的经济型便携式设备
- 简便易用 — 无需培训
- 电池供电，仅重 2.6 kg (5.7 lbs)。现场维护应用的理想之选



已停产设备

安捷伦为已停产但客户仍在使用的安捷伦/瓦里安已停产设备提供各项服务。例如 959 检漏仪、979 检漏仪等。

检漏仪器服务

安捷伦全球技术支持网络

我们的客户服务宗旨是：通过提供必要的技术支持，协助您提升工作效率、最大限度延长系统正常运行时间，同时实现最高投资回报率。

应用咨询


在我们的现场工程师帮助您评估需求，以确定最适合您的应用的检漏解决方案时，您将首次接触安捷伦全球技术支持网络。



应用咨询

升级换代计划

在购买新的 VS 检漏仪时，您可以用旧设备以旧换新。

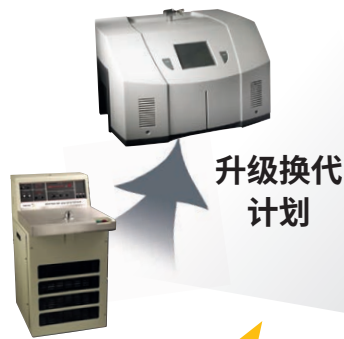

升级换代计划

安捷伦
优势计划

现场技术支持 与服务中心 技术支持

现场技术支持与服务中心技术支持

为了帮助您尽可能延长系统正常运行时间和投资回报时间，我们提供满足各种预算要求的一系列完整支持项目。



安捷伦
服务承诺

安捷伦服务承诺

安捷伦服务承诺：如果无法修复，我们将免费更换！只有安捷伦才能向您做出如此承诺，尽心尽力确保您的仪器以巅峰效能运转。



现场安装技术支持

在您需要安装新仪器时，当地的安捷伦工程师将对您进行实践操作培训。



现场安装技术支持

远程技术支持

远程技术支持

我们提供免费的电话技术支持、应用分析和快速解决方案。



最大限度提高
工作效率系统
最长运行时间
最工正常

检漏技术和方法培训

检漏技术和方法培训


有关泄漏速度测试与测定以及检漏仪维护的综合课程，提供深度内容和实践操作指导，让您能够将仪器功能发挥到极致。



安捷伦认证零部件

安捷伦认证零部件

由经过厂家培训的现场工程师使用安捷伦认证零部件进行维修和维护。这能保障检漏仪的质量、可靠性和性能。

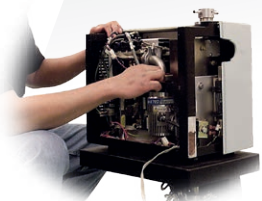



金牌计划

金牌和银牌服务合同提供最全面的服务范围。对于保修期内的仪器，安捷伦将执行所有定期维护。随仪器一同购买的服务计划将从第二年（工厂保修期结束时）开始生效。全面的一年计划，提供优质的支持服务和快速响应，确保仪器具有始终如一的高操作性能。

适用于 VS

范围与支持：

- 提供全面的质保范围，含部件和劳务费
- 提供产品发布以来所有必需的硬件和软件更新
- 不限次数的电话和电子邮件技术支持与帮助

每年一 (1) 次上门预防性维护服务：

- 全面检查并清洗质谱室、阀体和管路
- 更换离子源和灯丝
- 更换新的 O 形圈和密封垫
- 更换机械泵油（油泵）
- 更换涡旋泵泵头（干泵）
- 更换密封条 (PD03 & MD/BD15)
- 隔膜泵维护
- 验证真空系统的密封性、氦气灵敏度以及系统校准
- 该计划在仪器销售时一并购买，我们将在您使用仪器的第二年期间提供预防性维护服务

认证与法规认证：

- 更换校准漏孔（959 不含内置漏孔）
- 提供 ISO 可追溯的证书

详细信息：

- 现场服务：差旅费根据地理位置和级别而定
- 对于服务中心提供的服务：由客户负责仪器送至服务中心的运费。由安捷伦承担仪器送返客户处的运费
- 服务中心可提供维修服务的相关运输材料
- 不包括因仪器使用不当造成的损坏或故障

简要概览

包括所有必需的硬件与软件更新	是
更换新的校准漏孔以及再认证	是
上门维护服务	每年 1 次
延长保修期	1 年
响应时间	现场维修 2 天/服务中心维修 5 天
无限制的服务时间	是
不限次数的技术支持	是
差旅费	不包含



银牌计划

银牌服务合同与金牌服务合同类似；不同之处在于响应时间及费用较低。全面的一年计划，提供卓越的支持服务，确保仪器具有持续高效运行的性能。

适用于 VS 和 959

范围与支持：

- 提供全面的质保范围，含部件和劳务费
- 提供产品发布以来所有必需的硬件和软件更新
- 不限次数的电话和电子邮件技术支持与帮助

每年一 (1) 次预防性维护服务：

- 全面检查并清洗质谱室、阀体和管路
- 更换离子源和灯丝
- 更换新的 O 形圈和密封垫
- 更换机械泵油（油泵）
- 更换涡旋泵泵头（干泵）
- 更换密封条 (PD03 & MD/BD15)
- 隔膜泵维护
- 验证真空系统的密封性、氦气灵敏度以及系统校准
- 该计划在仪器销售时一并购买，我们将在您使用仪器的第二年期提供预防性维护服务

认证与法规认证：

- 更换校准漏孔（959 不含内置漏孔）
- 提供 ISO 可追溯的证书

详细信息：

- 现场服务：差旅费根据地理位置和级别而定
- 对于服务中心提供的服务：由客户负责仪器送至服务中心的运费。由安捷伦承担仪器送返客户处的运费
- 服务中心可提供维修服务的相关运输材料
- 不包括因仪器使用不当造成的损坏或故障

简要概览

包括所有必需的硬件与软件更新	是
更换新的校准漏孔以及再认证	是
延长保修期	1 年
上门维护服务	每年 1 次
响应时间	现场维修 5 天/服务中心维修 10 天
不限次数的技术支持	是
无限制的服务时间	是
差旅费	不包含



铜牌计划

铜牌计划将延长 1 年工厂保修期，不含任何预防性维护或再认证服务。

适用于尚未出保的机器

范围与支持：

- 提供全面的质保范围，含部件和劳务费
- 对于质谱室离子源，只提供部件服务
- 不限次数的电话和电子邮件技术支持与帮助

详细信息：

- 不包含预防性维护或任何类型的主动清洗
- 可在一年标准保修期满之前的任何时间订购
- 销售时仅可订购一年（总共覆盖两年质保）。只有在购买了 PM 计划或服务管理团

队批准的情况下才能享受额外的保修年限。如有特殊需求，请联系当地的安捷伦客户服务中心

- 现场服务：差旅费根据地理位置和级别而定
- 对于服务中心提供的服务：由客户负责仪器送至服务中心的运费。由安捷伦承担仪器送返客户处的运费
- 服务中心可提供维修服务的相关运输材料
- 不包括正常磨损和损耗的物品及消耗品
- 不包括因仪器使用不当造成的损坏或故障

简要概览

延长保修期	1 年
响应时间	现场维修 5 天/服务中心维修 10 天
不限次数的技术支持	是
无限制的服务时间	是
包括所有必需的硬件与软件更新	否
上门维护服务	否
更换新的校准漏孔以及再认证	否
差旅费	不包含

单次服务 — 按需服务选项



无合同 — 根据需要订购服务。本服务适用于所有型号的检漏仪（在服务中心执行）。对于 VS 和 959，可在服务中心执行服务或在现场提供服务

再认证

再认证服务专为因 ISO 标准要求或其他内部过程控制要求而需要保留仪器校准记录的客户而设计。再认证服务可与铜牌计划组合，以延长质保服务期限。

服务项目

- 基础的调试、重新校准和再认证。帮助客户满足需要进行仪器校准/认证的质量合规性要求（如：ISO9000）

认证与法规认证：

- 更换校准漏孔（959 不含内置漏孔）
- 提供 ISO 可追溯的证书
- 验证真空系统的密封性、氦气灵敏度以及系统校准

详细信息：

- 不包含预防性维护或任何类型的主动清洗
- 不提供任何额外的保修范围
- 现场服务：差旅费根据地理位置和级别而定
- 对于服务中心提供的服务：由客户负责仪器送至服务中心的运费。由安捷伦承担仪器送返客户处的运费
- 服务中心可提供再认证服务的相关运输材料
- 不包括因仪器使用不当造成的损坏或故障

简要概览

更换新的校准漏孔以及再认证	是
不限次数的技术支持	是
无限制的服务时间	是
响应时间	10 天
延长保修期	90 天（仅在提供服务之后）
包括所有必需的硬件与软件更新	否
上门维护服务	否
差旅费	不包含

单次服务 — 按需服务选项

预防性维护 PM

服务项目

- 全面检查并清洗质谱室、阀体和管路
- 更换离子源和灯丝
- 更换新的 O 形圈和密封垫
- 更换机械泵油（油泵）
- 根据计划要求提供涡旋泵服务（干泵）
- 验证真空系统的密封性、氦气灵敏度以及系统校准

详细信息：

- 由客户负责仪器送至服务中心的运费。由安捷伦承担仪器送返客户处的运费
- 服务中心可提供维修服务的相关运输材料
- 不包括因仪器使用不当造成的损坏或故障

范围与支持：

- 提供服务日期后 90 天的保修期，包含部件和劳务费
- 认证与法规认证
- 更换校准漏孔（959 不含内置漏孔）
- 提供 ISO 可追溯的证书

简要概览

更换新的校准漏孔以及再认证	是
不限次数的技术支持	是
全面清洁	是
无限制的服务时间	是
响应时间	10 天
延长保修期	90 天（仅在提供服务之后）
包括所有必需的硬件与软件更新	否
上门维护服务	否
差旅费	不包含



预防性维护 PM+

预防性维护 PM+ 增加了一些关键的服务项目，可确保仪器条件达到金牌或银牌计划的要求。

预防性维护服务：

- 全面检查并清洗质谱室、阀体和管路
- 更换离子源和灯丝
- 更换新的 O 形圈和密封垫
- 更换机械泵油（油泵）
- 根据计划要求提供涡旋泵服务（干泵）
- 更换密封条 (PD03 & MD/BD15)
- 隔膜泵维护
- 验证真空系统的密封性、氦气灵敏度以及系统校准
- 由服务工程师执行全面评估，以便：
 - 测试和验证主要组件和系统的密封性及版本级别
 - 评估应用与工作周期
 - 更新至最新软件版本

范围与支持：

- 提供服务日期后 90 天的保修期，包含部件和劳务费

认证与法规认证：

- 更换校准漏孔（959 不含内置漏孔）
- 提供 ISO 可追溯的证书

详细信息：

- 现场服务：差旅费根据地理位置和级别而定
- 对于服务中心提供的服务：由客户负责仪器送至服务中心的运费。由安捷伦承担仪器送返客户处的运费
- 服务中心可提供维修服务的相关运输材料
- 不包括因仪器使用不当造成的损坏或故障

简要概览

包括所有必需的硬件与软件更新	是
更换新的校准漏孔以及再认证	是
不限次数的技术支持	是
无限制的服务时间	是
延长保修期	90 天（仅在提供服务之后）
响应时间	10 天
上门维护服务	否
差旅费	不包含

单次服务 — 按需服务选项

固定价格维修

当检漏仪需要的维修超出一般预防性维护服务的范围时，您可以订购固定价格维修。通常适用于发生电子元件故障或泵故障的情况。您只需订购固定价格的服务，我们将保证通过维修解决问题。

检漏仪维修和预防性维护服务：

- 进行诊断和故障排除，确定故障原因
- 更换部件（根据需要）以恢复仪器功能
- 维修/更换一个系统泵（机械泵、涡旋泵或涡轮泵）
- 全面检查并清洗质谱室、阀体和管路
- 更换离子源和灯丝
- 更换新的 O 形圈和密封垫
- 更换机械泵油（油泵）
- 根据计划要求提供涡旋泵服务（干泵）
- 验证真空系统的密封性、氦气灵敏度以及系统校准

范围与支持：

- 提供服务日期后 90 天的保修期，包含部件和劳务费

认证与法规认证：

- 更换校准漏孔（959 不含内置漏孔）
- 提供 ISO 可追溯的证书

详细信息：

- 现场服务：差旅费根据地理位置和级别而定
- 对于服务中心提供的服务：由客户负责仪器送至服务中心的运费。由安捷伦承担仪器送返客户处的运费
- 服务中心可提供维修服务的相关运输材料
- 不包括因仪器使用不当造成的损坏或故障

简要概览

更换新的校准漏孔以及再认证	是
包括所有必需的硬件与软件更新	是
不限次数的技术支持	是
无限制的服务时间	是
响应时间	10 天
延长保修期	90 天（仅在提供服务之后）
上门维护服务	否
差旅费	不包含

工厂检修

当检漏仪失效或多个关键部件（涡轮泵和机械泵、电子元件、显示屏等）发生故障时，您可以订购工厂检修服务。工厂检修服务将彻底重新组装检漏仪。

全面重装和维修检漏仪：

- 全面检查并清洗质谱室、阀体和管路
- 更换离子源和灯丝
- 更换新的 O 形圈和密封垫
- 根据需要更换非功能性部件（电子元件、阀等）
- 全面维护/重装机械泵（油泵或干泵）
- 如果需要，更换光谱仪管路中的高真空泵
- 验证真空系统的密封性、氦气灵敏度以及系统校准

范围与支持：

- 提供服务日期后 90 天的保修期，包含部件和劳务费

认证与法规认证：

- 更换校准漏孔（959 不含内置漏孔）
- 提供 ISO 可追溯的证书

详细信息：

- 仅对于服务中心提供的服务：由客户负责仪器送至服务中心的运费
- 由安捷伦承担仪器送返客户处的运费
- 服务中心可提供维修服务的相关运输材料

简要概览

包括所有必需的硬件与软件更新	是
更换新的校准漏孔以及再认证	是
无限制的服务时间	是
不限次数的技术支持	是
响应时间	10 天
延长保修期	90 天（仅在提供服务之后）
上门维护服务	否
差旅费	不包含

应用技术支持服务

请联系安捷伦客户服务中心，我们将为您定制满足您要求的技术支持。两项标准技术支持服务如下：

LD 安装和现场培训（1/2 天）

- 安捷伦工作人员将提供有关新质谱仪检漏仪的基础培训和现场培训
- 差旅费根据地理位置远近而定

泄漏检测应用支持/天（1 天）

- 安捷伦应用工程师将分析您的应用并就如何优化泄漏测试给出建议
- 差旅费根据地理位置远近而定



合同比较概览

服务支持对比					
	上门服务	再认证	铜牌计划	银牌计划	金牌计划
延长保修期	90 天（仅在提供服务之后）	90 天（仅在提供服务之后）	1 年	1 年	1 年
响应时间	10 天	10 天	5 天	5 天	2 天
包括所有必需的硬件与软件更新	否*	否	否	是	是
不限次数的技术支持	否	否	是	是	是
年度预防性维护服务	是	否	否	是	是
更换新的校准漏孔以及再认证	是**	是**	否	是**	是**

* PM+ 服务将包括所有必需的硬件和软件升级

** 不包括 959

按检漏仪型号提供的服务

按型号提供的服务支持							
	上门服务	再认证	预防性维护服务 PM	预防性维护服务 PM+	铜牌计划	银牌计划	金牌计划
VS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
959	✓	✓	✓	✓		✓	✓
PHD-4					✓		
979 2 型	仅服务中心*						
979 1 型	仅以旧换新						
956	仅服务中心*						
947/948	仅服务中心*						
960	仅服务中心*						
938-41	仅服务中心*						

* 如需了解例外情形，请联系当地的安捷伦客户服务中心



经过厂家培训的服务人员

北美

- 1 级 = 以城市为中心的 200 英里半径范围内免差旅费
- 2 级 = 以城市为中心的 200 英里半径范围内差旅费固定
- 3 级 = 1 级和 2 级之外，统一费用



1 级

圣克拉拉、洛杉矶、凤凰城、波士顿、纳什维尔、克利夫兰-多伦多（仅加拿大）



2 级

波特兰、西雅图（埃伦斯堡）、丹佛、休斯敦、阿尔伯克基、达拉斯、奥兰多、亚特兰大、南卡罗莱纳州哥伦比亚、罗利/达勒姆、辛辛那提、芝加哥/中途岛、明尼阿波利斯、费城



服务中心：马萨诸塞州比勒利卡



技术支持与研究中心

安捷伦科技公司。121 Hartwell Avenue, Lexington MA 02421, USA

电话：+1 781 861 7200 - 传真：+1 781 860 5437 - 免费热线：+1 800 882 7426 - vpl-customer@agilent.com

安捷伦全球架构

欧洲和印度

1 级 = 150 km 半径范围内免差旅费*

2 级 = 差旅费根据差旅时间而定*

* 与最近的服务中心之间的距离



服务中心

格勒诺布尔 (法国)、克劳利 (英国)、诺伊施塔特 (德国)、慕尼黑 (德国)
加里波第 (意大利)、福尔梅洛 (意大利)、班加罗尔 (印度)



现场调度中心

阿姆斯特丹 (荷兰)、伦敦 (英国)、巴黎 (法国)、格勒诺布尔 (法国)、
科隆 (德国)、慕尼黑 (德国)、都灵 (意大利)、费拉拉 (意大利)、
罗马 (意大利)、班加罗尔 (印度)



技术支持、配送中心和工厂

Agilent Technologies Italia SpA - via F.lli Varian 54 - 10040 Leini (Torino), Italy
电话: +39 011 9979 111 - 传真: +39 011 9979 350 - 免费热线: 00 800 234 234 00
vpt-customer@agilent.com



经过厂家培训的服务人员

亚洲

差旅费根据具体报价而定



服务点

成都、广州、上海、北京（中国）、台北（中国台湾）、新加坡（新加坡）、首尔（韩国）、槟城（马来西亚）



服务中心

成都（中国）、新加坡（新加坡）、槟城（马来西亚）



工厂：槟城

Agilent Technologies Sales (M) Sdn Bhd
2 Jalan SS 21/37, Damansara Uptown - 47400 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan - West Malaysia
电子邮件：vps-customerservice@agilent.com

订购信息

如需了解服务的费用，请联系第 16-18 页列出的团队

合同覆盖范围		
项目	描述	部件号
VS 油式	金牌服务 VS	R3703A
	银牌服务 VS	VSWFULL
VS 干式, 不含涡旋泵服务	金牌服务 VS	R4406A
	银牌服务 VS	R4407A
VS 干式 MD/BD30 & MD/BD30+	金牌服务 VS	R3701A
	银牌服务 VS	VSDFULL
VS 干式 PD03 & MD/BD15	金牌服务 VS	R3702A
	银牌服务 VS	R3750A
959 油式	金牌服务 959	R3799A*
	银牌服务 959	959WFULL*
959 干式	金牌服务 959	R3798A*
	银牌服务 959	959DFULL*
VS	延长保修	EXTWARR
PHD-4	延长保修	EWPHD4

上门服务		
项目	描述	部件号
所有型号	再认证	LDCRT1
VS 油式 & C15	预防性维护 VS	VSW1PM
	固定价格维修 PM VS	R3782A
	预防性维护 PM+ VS	R3784A
VS 油式	工厂检修 VS	R3783A
VS PD03 & MD15	工厂检修 VS	R3796A
VS PD03 & MD/BD15	预防性维护 PM VS	R3752A
	预防性维护 PM+ VS	R3797A
	固定价格维修 VS	R3795A
VS 干式 MD/BD30 & MD/BD30+	预防性维护 PM VS (不含涡旋泵服务)	VSD1PM
	预防性维护 PM VS (更换涡旋泵模块)	VSD1PM1TS
	预防性维护 PM+ VS (不含涡旋泵服务)	R3787A
	预防性维护 PM+ VS (更换涡旋泵模块)	R3794A
	固定价格维修 PM VS (不含涡旋泵服务)	R3785A
	固定价格维修 PM VS (更换涡旋泵模块)	R3792A
959 油式	工厂检修 VS (更换涡旋泵模块)	R3786A
	预防性维护 PM 959	959W1PM
	预防性维护 PM+ 959	R3764A*
	固定价格维修 959	R3762A*
	工厂检修 959	R3763A*

项目	描述	部件号
959 干式	预防性维护 PM 959 (不含涡旋泵服务)	959D1PM
	预防性维护 PM 959 (包括涡旋泵服务)	959D1PM1TS
	预防性维护 PM+ 959 (不含涡旋泵服务)	R3765A*
	预防性维护 PM+ 959 (包括涡旋泵服务)	R3766A*
	固定价格维修 959 (不含涡旋泵服务)	R4408A*
	固定价格维修 959 (包括涡旋泵服务)	R4410A*
	工厂检修 959 (更换涡旋泵模块)	R4411A*
959 (已停产型号)	预防性维护 959 油式	R4416A
	预防性维护 959 干式 (不含涡旋泵服务)	R4417A
	预防性维护 959 干式 (包括涡旋泵服务)	R4418A
	固定价格维修 959 油式	R4419A*
	固定价格维修 959 干式 (不含涡旋泵服务)	R4420A*
	固定价格维修 959 干式 (包括涡旋泵模块更换)	R4422A*
	固定价格维修 959 油式	R4423A*
979 2 型油式	预防性维护 979 2 型 (单/双)	979W1PM
	固定价格维修 979 2 型 (单/双)	R3767A*
	固定价格维修 979 2 型 (单/双)	R3768A*
979 2 型干式	预防性维护 979 2 型 (不含涡旋泵服务)	979D1PM
	预防性维护 979 2 型 (包括针对 1 个涡旋泵的涡旋泵服务)	979D1PM1TS
	预防性维护 979 2 型 (包括针对 2 个涡旋泵的涡旋泵服务)	979D1PM2TS
	固定价格维修 979 2 型 (不含涡旋泵服务)	R3770A*
	固定价格维修 979 2 型 (包括 1 个涡旋泵模块)	R3776A*
	固定价格维修 979 2 型 (包括 2 个涡旋泵模块)	R4413A*
	固定价格维修 979 2 型 (包括 1 个涡旋泵模块)	R3771A*
固定价格维修 979 2 型 (包括 2 个涡旋泵模块)	R4414A*	
947 / 948 / 960	针对油式设备的预防性维护	VCABW1PM
	针对干式设备的预防性维护	VCABD1PM
	固定价格维修 油式设备	R3756A*
	固定价格维修 干式设备	R3758A*
947 / 948 / 960 台式	固定价格维修 油式设备	R3755A*
	固定价格维修 干式设备	R3757A*
956	针对油式设备的预防性维护	R3781A*
	固定价格维修 油式设备	R3779A*
	固定价格维修 油式设备	R3780A*
938-41	针对油式设备的预防性维护	R3761A
	固定价格维修 油式设备	R3759A*
	固定价格维修 油式设备	R3760A*

* 仅在北美有效

订购信息



安捷伦科技公司

美国

安捷伦科技公司
121 Hartwell Avenue,
Lexington MA 02421, USA
电话: +1 781 861 7200
传真: +1 781 860 5437
免费热线: +1 800 882 7426
vpl-customer@agilent.com

中国

北京分公司

安捷伦科技(中国)有限公司
中国北京市朝阳区望京北路3号
邮编 100102
电话: +86 (0)10 6439 7549
传真: +86 (0)10 6439 2765
免费热线:
800 820 6778 (固定电话拨打)
400 820 6778 (手机拨打)
contacts.vacuum@agilent.com
vpc-customerservice@agilent.com

上海分公司

安捷伦科技公司
中国上海市虹口区四川北路1350号
利通广场16楼
邮编 200080
电话: +86 (0)21 3612 7805
传真: +86 (0)21 6628 5169
免费热线:
800 820 6778 (固定电话拨打)
400 820 6778 (手机拨打)

广州分公司

安捷伦科技公司
中国广州市天河区北路233号
中信广场66楼08室
邮编 510613
电话: +86 (0)20 3811 3988
传真: +86 (0)20 8669 5861
免费热线:
800 820 6778 (固定电话拨打)
400 820 6778 (手机拨打)

深圳分公司

安捷伦科技公司
深圳福田CBD福华一路6号
免税商务大厦3楼
邮编 518048
电话: +86 (0)755 8307 9588
传真: +86 (0)755 8276 3182
免费热线:
800 820 6778 (固定电话拨打)
400 820 6778 (手机拨打)

巴西

Agilent Technologies Brasil
Avenida Marcos Penteado de Ulhoa
Rodrigues, 939 - 6º andar
Castelo Branco Office Park
Torre Jacarandá - Tamboré
Barueri, Sao Paulo CEP: 06460-040
免费热线: 0800 728 1405

比荷卢经济联盟

Agilent Technologies Netherlands BV
Groenelaan 5, 1186 AA Amstelveen
The Netherlands
电话: +31 20 547 2000
传真: +31 20 547 2093
免费热线: 00 800 234 234 00

法国

Agilent Technologies
Parc Technopolis - Z.A. de Courtaboeuf
3, avenue du Canada - CS 90263
91978 Les Ulis cedex, France
电话: +33 (0) 1 64 53 61 15
传真: +33 (0) 1 64 53 50 01
免费热线: 00 800 234 234 00
vpf.sales@agilent.com

德国和奥地利

Agilent Technologies
Sales & Services GmbH & Co. KG
Lyoner Str. 20
60 528 Frankfurt am Main, Germany
电话: +49 69 6773 43 2230
传真: +49 69 6773 43 2250

印度

Agilent Technologies India Pvt Ltd
Unit Nos 105-116
First Floor, Splendor Forum,
Plot No.-3, District Centre, Jasola
New Delhi-110025
电话: +91 11 4623 7100
传真: +91 4623 7105
免费热线: 18001801517

意大利

Agilent Technologies Italia SpA
via F.lli Varian 54
10040 Leini (Torino), Italy
电话: +39 011 9979 111
传真: +39 011 9979 350
免费热线: 00 800 234 234 00
vpt-customer@agilent.com

日本

Agilent Technologies Japan, Ltd.
9-1 Takakura-cho Hachioji-city
Tokyo Japan
电话: +81 3 5232 1253
传真: +81 - 120-565-154
免费热线: +81 - 120-477-111
jp-vvt-sales.pdl-ext@agilent.com

韩国

Agilent Technologies Korea Ltd.
Shinsa 2nd Bldg. 1F, 966-5 Daechi-dong
Kangnam-gu, Seoul, Korea 135-280
电话: +82 (0)2 2194 9449
传真: +82 (0)2 3452 3947
免费热线: 080 222 2452
vpk-customerservice@agilent.com

墨西哥

Agilent Technologies
Concepcion Beistegui No 109
Col Del Valle, C.P. 03100, Mexico, D.F.
电话: +52 5 523 9465
传真: +52 5 523 9472

新加坡

Agilent Technologies Singapore Pte Ltd.
No.1 Yishun Avenue 7, Singapore 768923
电话: +65 6215 8045
传真: +65 6754 0574
免费热线: 1 800 2762622
vps-customerservice@agilent.com

东南亚

Agilent Technologies Sales Sdn Bhd
Unit 201, Level 2 uptown 2,
2 Jalan SS21/37, Damansara Uptown
47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
电话: +60 3 7712 6106
传真: +60 3 6733 8121
免费热线: 1 800 880 805
vps-customerservice@agilent.com

中国台湾

安捷伦科技(台湾)有限公司
中国台湾桃园市平镇区
高双路20号
邮编 32450
电话: +886 3 4959204
vacuum.cnmarketing@agilent.com

英国和爱尔兰

Agilent Technologies UK Ltd.
6 Mead Road, Oxford Industrial Park
Yarnton, Oxford OX5 1QU, UK
电话: +44 (0) 1865 291570
传真: +44 (0) 1865 291571
免费热线: 00 800 234 234 00



本文信息如有变更,恕不另行通知

© 安捷伦科技(中国)有限公司, 2017

2017年10月, 中国出版

VPD0517CHCN



Agilent Technologies